



AUTENTICA

SAF
HYALURONİK ASIT

100% me.

AUTENTICA

Güzelliğini deęiřtirme – sadece parlamasına izin ver

Bugünlerde güzellik hep bir řeyleri kanıtlama çabasında görünüyor: sonsuzluk, kusursuzluk, gençlik... Bu dönüşüm yarışında **Autentica** durmayı seçiyor. Ve dinlemeyi.

Çünkü gerçek güzellik yaratılmaz. **Uyanır.**

Autentica, tek tip güzellik anlayışını reddeden ve **kendine ait gençliği yaşamayı** seçenler için yaratılan bir etik üzerine kurgulandı:

- Filtrelerin dünyasında biz gerçeęi seçiyoruz.
- Aşırılıklar pazarında biz uyumu seçiyoruz.
- Tek tipleşme çağında biz kimlięi seçiyoruz.

Autentica, aynaya bakıp gerçek yansımasını görmek isteyenler için var.

“Farklı olmak istemiyorum.
Daha çok kendim olmak istiyorum.”
Autentica, kişiye **özel, özenli ve anlamlı** deneyimler arayan bilinçli kadın ve erkeklere hitap eder, cildi **içeriden** uyararak doğal yenilenme kapasitesini yeniden harekete geçirir. Deęişim yavaş, derin ve tutarlıdır.

VİZYONUMUZ

- Kendi cildinde iyi hissetmek;
- Canlılıęını yeniden ortaya çıkartmak;
- Doęal ve akıllı tedavileri tercih etmek,



100% me.



≈REGENYAL



AUTENTICA



MİSYONUMUZ – FİZYOLOJİYE SAYGI

Estetik tıp dünyasında **Autentica**, **akıllı bakımın** yeni çağını temsil ediyor. Özel **PHYSIOLOGIC TECH™** sayesinde bu tedavi, **yüzün hacimlerini değiştirmeden**, kimyasal **çapraz bağlayıcılar kullanmadan**, **zorlamalı ve yapay etkiler** yaratmadan cilde derinlemesine nem, ton ve sıkılık kazandırır.

Somut faydaları:

- Daha canlı, ışıldayan ve nemli bir cilt görüntüsü ;
- Fark edilir ama doğal bir iyileşme ;
- Tedaviye bağımlılık yaratmaz;
- İstenmeyen hacim oluşturmaz;

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ

GÜZELLİĞİN FİZYOLOJİK ZEKASI

Yeni nesil **biyorevitalizasyon**: daha uzun ömürlü, daha güvenli, daha doğal.

Autentica, cildin fizyolojik mekanizmalarıyla kusursuz sinerji içerisinde çalışan eşsiz **PHYSIOLOGIC TECH™** teknolojisini temel alır. Yüksek moleküler ağırlıklı hyalüronik asidin (800–1200 KDa) kullanılması ve her aşamada kontrol edilen bir süreç sayesinde, stabil ve kimyasal çapraz bağlayıcılardan arı üç boyutlu bir yapı elde ediyoruz.



Serbest hyaluronik asit
64 mg / 2ml



NO BDDE
çapraz bağ içermemektedir



100% me.

PHYSIOLOGIC TECH™



AUTENTICA



PHYSIOLOGIC
TECH

Autentica, cildin fizyolojik mekanizmalarıyla kusursuz bir uyum içinde çalışan özel bir teknoloji olan **PHYSIOLOGIC TECH™** üzerine kuruludur. **800–1200 KDa** yüksek molekül ağırlıklı **serbest** hiyalüronik asit kullanımı ve her aşaması titizlikle kontrol edilen bir süreç sayesinde, **kimyasal çapraz bağlayıcılar içermeyen, stabil ve üç boyutlu bir yapı elde edilir.**
Physiologic Tech

Yeni nesil biyorevitalizasyon: daha kalıcı, daha güvenli, daha doğal.

AUTENTICA, hiyalüronik asidi **kimyasal çapraz bağlama yöntemleri olmaksızın** stabilize eden özel teknoloji **Physiologic Tech'i** kullanan intradermal bir üründür. (Class III Medical Device) Molekülü kimyasal olarak değiştirmek yerine teknoloji, **fiziksel bir şekilde** etki eder: **pH, sıcaklık, konsantrasyon ve oksijen** düzeyleri hassas biçimde kontrol edilerek HA molekülleri arasında **düzenli ve stabil hidrojen bağlarının** oluşumu sağlanır. Böylece cilt içinde **kompakt, dayanıklı ve yüksek stabiliteye** sahip **güçlü üç boyutlu** bir yapı ortaya çıkar. Bu yapı aynı zamanda **biyolojik olarak aktiftir ve kimyasal çapraz bağlayıcılar** kullanılmadan elde edilir.

100% me.

ANTI-GRAVITY TECHNIQUE

ÜRETİM PROTOKOLÜ

- 1.HA'nın WFI içinde çözülmesi: çözelti 4–10 C'de soğuk banyoda bir gece boyunca nazikçe çalkalanır.
 - 2.pH, seyreltilmiş asit kullanılarak 4.5–5.5 aralığına ayarlanır.
 - 3.NaCl düşük sıcaklıklarda yavaşça eklenir ve optimum konsantrasyona ulaşılan kadar her 5 dakikada bir karıştırılır.
 - 4.Oksijen uzaklaştırılır (inert ortam).
 - 5.Olgunlaşma: çözelti 4 C'de 24 saat bekletilir ve üç boyutlu stabilizasyon elde edilir.
- Bu reaksiyon koşulları, hidrojen bağlarının stabilitesini artırarak düzenli ve kompakt yapıların oluşumunu destekler; bu da viskozitede (akışkanlık) artışa yol açar. Reaksiyon ortamı iki HA molekülü arasında daha yakın bir fiziksel temas sağlar ve böylece zincirin kompaktlığını ve stabilitesini artırır.
- Kompakt** formda hiyalüronik asit enzimatik saldırılara **daha az maruz kalır**, rezorpsiyona karşı daha dirençli olur ve zaman içinde **daha stabil bir viskoelastisiteyi** korur.

Viskozite çalışmaları, Na⁺ iyonlarının kademeli olarak eklenmesiyle **daha yüksek yoğunluk** ve moleküler organizasyon göstererek elde edilen **kompakt ve fonksiyonel konformasyonu doğrulamaktadır**. Hiçbir invaziv kimyasal adım yok. Sadece **doğanın zaten yarattığını güçlendirmek için optimize edilmiş koşullar var**.

ÖZETLE

AUTENTICA, moleküler fiziğin **yasalarını en saf hiyalüronik asit ile birleştirerek dokularda üstün bir stabilite sunar; güvenlik, biyouyumluluk ve biyolojik fonksiyonellikten ödün vermez**.

KİLİT NOKTA: DOĞAL MOLEKÜLER STABİLİTE

Physiologic Tech, hiyalüronik asidin **kendi kendine kompakt bir yapı oluşturmasına olanak tanır**. Bunun için:

- **Hafif asidik pH (5–6)** → protonasyonu artırır, hidrojen bağlarını güçlendirir
- **Düşük sıcaklık (4–10 C)** → bozulmayı önler, moleküler bütünlüğü artırır
- **Oksijen yokluğu** → ROS'un oksidatif saldırılarını önler
- **Yüksek konsantrasyon ve yüksek molekül ağırlığı** → HA'nın düzenli şekilde agregasyonunu teşvik eder

Bu **kimyasal değil biyofiziksel** bir yaklaşımdır; **HA'nın özelliklerini artırırken** sağlığını ve fonksiyonelliğini korur.

Özellikleri

AUTENTICA (Fisiologic Tech)

Kimyasal çapraz bağlayıcılar

✗ Yok

Dokularda stabilite

☑ Yüksek (kompakt yapı)

Etki süresi

☑ Uzun

Biyoaktivite

☑ Korunmuş

Fizyolojiye saygı

☑ Tamamen


Güvenlik ve tolerabilite

☑ Yüksek




ANTI-GRAVITY TEKNİĞİ

DOĞAL LIFTING VE YENİDEN ŞEKİLLENDİRME

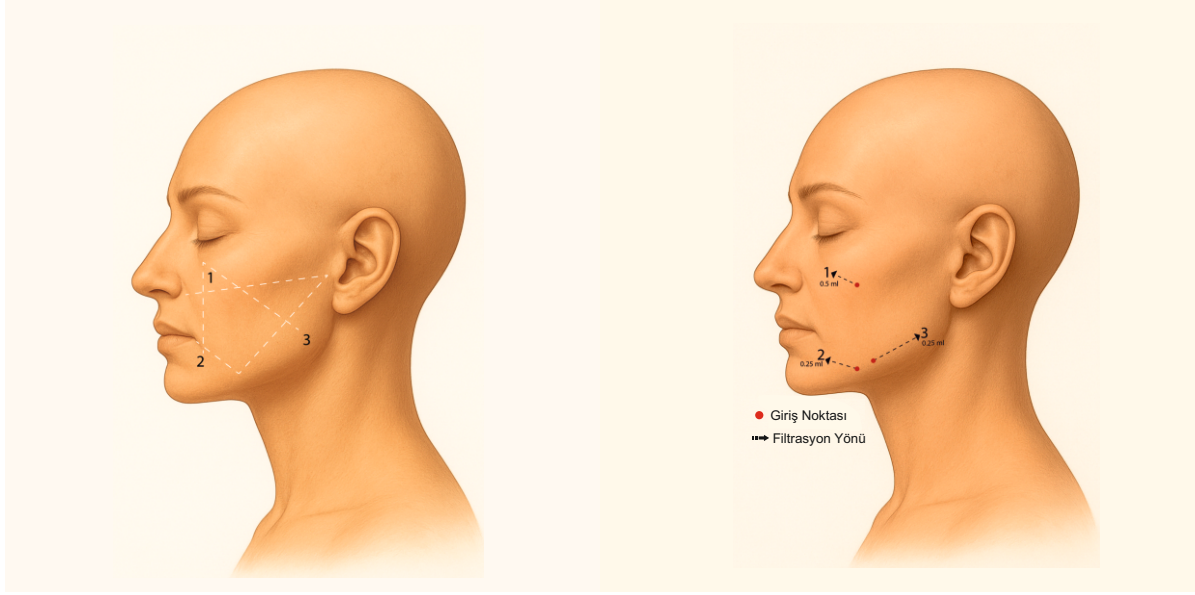

UYGULAMA BÖLGELERİ

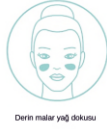

Derin malar yağ pedi dokusu

Derin malar yağ pedi bölgesi: Sağ 0,5 ml - Sol 0,5 ml



Marionette

Marionette bölgesi: Sağ 0,25 ml - Sol 0,25 ml



Mandibüler bölge

Mandibular açığı: Sağ 0,25 ml - Sol 0,25 ml



ÖNCESİ

SONRASI



35 Yaş altı

T0 T 30 gün 6 ayda bir tekrar

1. Seans:

Kanül ile uygulama: 25G/38

Toplam 2ml (Sağ 1 ml - Sol 1ml)

2.Seans:

Kanül ile uygulama: 25G/38

Toplam 2ml (Sağ 1 ml - Sol 1ml)

6 ay sonra 1. ve 2. seansın tekrarı önerilmektedir.

35 - 45 Yaş altı

T0 T 30 gün 4 ayda bir tekrar

1. Seans:

Kanül ile uygulama: 25G/38

Toplam 2ml (Sağ 1 ml - Sol 1ml)

2.Seans:30. Gün

1. Seansın tekrarı

4 ay sonra 1. ve 2. seansın tekrarı önerilmektedir.

45 - 55 Yaş altı

T0 T 30 gün T 60 gün 5 ayda bir tekrar

1. Seans:

Kanül ile uygulama: 25G/38

Toplam 2ml (Sağ 1 ml - Sol 1ml)

2.Seans:30. Gün

1. Seansın tekrarı

3. Seans:

Tolam 2ml (Sağ 1 ml - Sol 1 ml)

5 ay sonra 1. ve 2. ve 3.seansın tekrarı önerilmektedir.

55 Yaş altı

T0 T 30 gün T 60 gün T 90 gün 3/4 ayda bir tekrar

1. Seans:

Kanül ile uygulama: 25G/38

Toplam 2ml (Sağ 1 ml - Sol 1ml)

2.Seans:30. Gün

1. Seansın tekrarı

3. Seans:

Tolam 2ml (Sağ 1 ml - Sol 1 ml)

4.Seans: 90. Gün

olam 2ml (Sağ 1 ml - Sol 1 ml)

3/4 ay sonra 1. ve 2. 3. ve 4. seansın tekrarı önerilmektedir.



BELİRTİLEN PROTOKOL ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖZLEMSEL KLİNİK ÇALIŞMA (ANTI-GRAVITY TEKNİĞİ)

ÇALIŞMA DÖNEMİ: Mart 2025 T0 – Nisan 2025 T1 – Mayıs 2025 T2

ARAŞTIRMA EKİBİ: Dr Alp Mamak (Medikal estetik doktoru), Dr Averame (çalışma koordinatörü), Dr Capponi (Radyoloji uzmanı)

ÖRNEKLEM: 30–60+ yaş arası 23 hasta

PROTOCOL: Yaş grubuna bağlı olarak 2–3 seans. Ürün: Autentica Anti-Gravity Technique (64 mg/2 ml) 25G/38 mm kanül ile enjeksiyon

Nihai değerlendirme: Elmacık kemiği bölgesinin deri ultrasonu T0 öncesi ve T2 sonrası Ürünün intradermal davranış analizi

SONUÇLAR: Artmış hücre aktivitesi – Görünür doku stimülasyonu – Doğal iskele etkisi – Mükemmel dermal entegrasyon

Her seans için tedavi öncesi ve sonrası ultrason taraması yapılarak cilt ve yağ kalınlığının evrimi ve ürünün dağılımı değerlendirildi.


Klinik değerlendirme, cilt tonu ve dokusunun analizi ile birlikte PAIS ve GAIS ölçekleri kullanılarak algılanan memnuniyet ölçüldü.

Ultrason, ürünün dermiste homojen şekilde dağıldığını, düzensizlik veya doku ayrışması olmadığını gösterdi. 30. günde (T1), alanların %43'ünde yağ kalınlığında $\geq$ %20 artış görüldü ve ortalama artış +1 mm oldu. 60. günde (T2) iyileşme pozitif (+0,6%) olarak devam ettive hafif fizyolojik bir oturma gözlemlendi.

Cilt kalınlığı için de benzer bir eğilim izlendi; T1'de +%18 iyileşme ve T2'de başlangıca göre stabil +%9,5 iyileşme kaydedildi.

Veri trendi, AUTENTICA'nın basit bir dolgu maddesi olarak değil, ürünü emildikten sonra bile devam eden derin bir rejeneratif yanıtı aktive edebilen progresif bir biyostimülatör olarak çalıştığını gösteriyor. Grafikler ayrıca, tedavinin fizyolojik doğasıyla uyumlu olarak bireysel anlamlı değişkenliği de vurguluyor.

Paralel olarak, klinik veriler de kademeli ve gözle görülür bir iyileşmeyi göstermeye devam etti: “mükemmel” doku kategorisi %4,5'ten %50'ye yükselirken, “zayıf” kategori tamamen ortadan kayboldu. “İyi” ton %0'dan %77,3'e çıktı ve PAIS ile GAIS ölçekleri T1 ve T2 arasında orta-yüksek seviyede stabil skorlar gösterdi: GAIS yükseldi (4,0'dan 4,4'e), PAIS ise esasen stabil kaldı (4,4'ten 4,3'e).

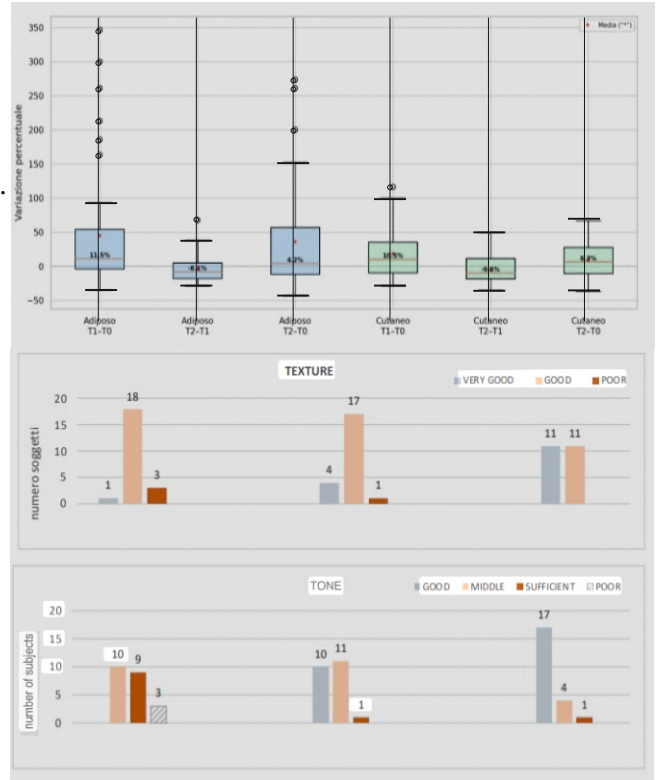



AUTENTICA



AUTENTICA

